

Pink Hip Kit - S + N

Bruksanvisning

Postless Hip Positioning System


Enhetsbeskrivning

Pink Hip Kit S+N är designad för att användas med Smith and Nephew Hip Positioning System.

Pink Hip Kit S+N är får endast användas en gång och skall kasseras efter det kirurgiska ingreppet är klart.

Pink Hip Kit S+N (Figur 1) består av följande komponenter:

- A. Huvudlägesställare (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Kroppsrem (1)
- D. Lyftduk (1)
- E. Armbordsremmar (1 par)
- F. Armbordsdynor (1 par)

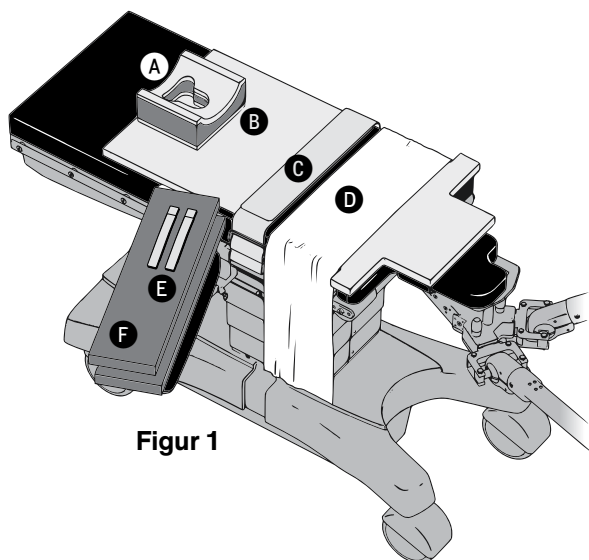

Figur 1

Avsedda användare

Pink Hip Kit S+N är avsett att användas av sjukvårdspersonal i enlighet med dessa bruksanvisningar. Användningsmiljön är en professionell sjukvårdsinrättning.

Avsedd användning

Pink Hip Kit S+N är utformad för att användas med Hip Positioning System och förhindrar att patienten rör sig på OR-bordet under artroskopiska höftoperationer.

Indikationer för användning

Pink Hip Kit S+N är indicerat för användning för att placera patienter under artroskopiska höftoperationer.

Målpatientgrupper

Patientpopulationen består av patienter för vilka en höftledsartroskopisk procedur bedöms vara nödvändig av operationskirurgen.

Kontraindikationer

- Ingen

Varningar

- Det är vårdgivarens ansvar att vara bekant med produktens IFU samt utbildning av relevant vårdpersonal.
- Produktanvändning utanför indikationer eller avsedd användning är förbjuden. Ändringar av produkten kan ändra förväntade resultat.
- Se till att Pink Hip Kit S + N är platt under all hantering och förvaring av Pink Hip Pad. Rulla eller vik inte.
- Se till att patientens hud är i direkt kontakt med Pink Hip Pad under hela ingreppet.

Försiktighetsåtgärder

- Inspektera produktförpackningen innan den öppnas. Om produktförpackningen är skadad eller punkterad, **ANVÄND INTE**.
- Inspektera produkten och innehållet när den tas ur förpackningen. Om produkten är skadad eller defekt, **ANVÄND INTE** och kontakta omedelbart tillverkaren för support.
- Var försiktig när du placerar kirurgiska patienter. Dra inte patienter över ytan av den Pink Hip Pad, om du gör det kan det leda till produktskador och funktionsförlust.

1. Se bruksanvisningen till Smith and Nephew Hip Positioning System för information om hur systemet sätts upp.
2. Placera Pink Hip Pad på OR-bordet så att justeringsflikarna ligger i linje med Smith and Nephew Supine Table Attachment. (Figur 2) Texten "Denna sida uppåt" ska vara vänd uppåt på de vita kardborreband som sitter på Pink Hip Pad.

Figur 2


Rikta in flikarna på Pink Hip Pad efter de på bordstillbehöret.



WARNING: Se till att Pink Hip Pad kommer direkt i kontakt med ytan på OR-bordsdynan.

3. Fäst alla vita kardborreband på skenorna till OR-bordet genom att placera flikens ögledel mellan bordet och tillbehörsskenan och sedan uppåt över skenans utsida och fäst kardborrebandets krokdel över ögledelen. (Figur 3)


Figur 3

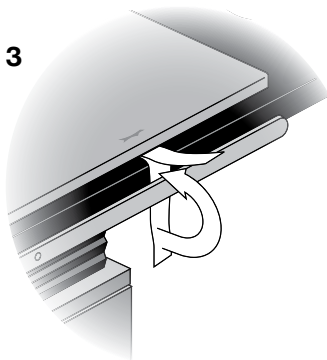

4. Fäst det breda lila dynremmen under det kirurgiska bordstillbehöret genom att först placera remmen utan kardborreband under bordstillbehöret och överlappa den med den återstående änden av remmen, och säkra kardborrebandet för att säkerställa en tät passform. (Figur 4)
5. Placera huvudlägesställaren på Pink Hip Pad nära kanten längst bort från höftfästet på en plats som är tillräcklig för patientens huvudplacering. (Figur 1)
6. Centra lyftduken över dynan strax ovanför justeringsflikarna. (Figur 1)

WARNING: Lyftduken ska endast täcka den del av dynan som är vänd mot patientens rygg (mellan skulderblad och korsben).

Figur 4 Vy från under bordstillbehöret

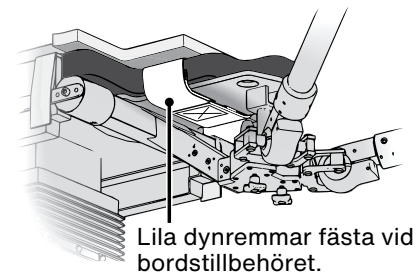


Lila dynremmar fästa vid bordstillbehöret.

7. Fäst båda delarna av den tvådelade kroppsremmen på tillbehörsskenorna:

- Identifiera varje del av remmen - Del A har ett litet kardborreband och del B har en lång kardborreflik. (Figur 5)
- Börja med del A, orientera remmen så att den lilla kardborrerutan är vänd utåt, bort från bordsdynan. Dra upp änden på bältet mellan bordet och tillbehörsskenan och skjut er plastspännet över änden på remmen. Mata remmen genom spännet tills det sitter ordentligt på tillbehörsskenan och lägg den fria änden över bordet.
- Upprepa proceduren med del B på remmen på andra sidan bordet och se till att kroksidan på den långa kardborrefliken är vänd inåt mot bordsdynan.
- Fäst remmarna tillsammans med den långa kardborrefliken i del B ovanpå del A.

Figur 5

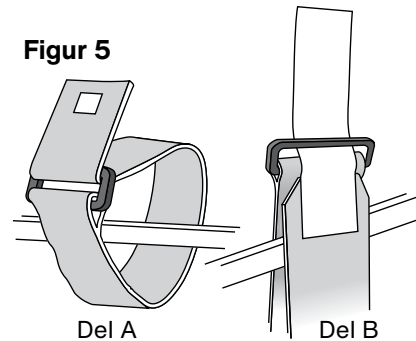

Del A

Del B


8. Överför patienten till Pink Hip Pad. Placera patienten enligt följande:

- Patientens främre övre iliac-rygggrad (ASIS) ska placeras direkt på justeringsflikarna. (Figur 6)
- Cirka sex tum av Pink Hip Pad sträcker sig bortom patientens gluteala veck.
- Se till att axlarna inte sträcker sig förbi den övre kanten av Pink Hip Pad för att maximera hudkontakten.
- Huden i det scapulära området och korsbenet måste komma i kontakt med ytan på Pink Hip Pad.
- Använd vid behov lyftduken för att försiktigt LYFTA upp patienten från dynan för att flytta om den. Dra inte patienten på dynan. Se till att Pink Hip Pad förblir platt hela tiden.

9. Placera en lila dyna på armpattan på OR-bordet på motsatt sida av den höft som ska opereras.
10. Placera patientens arm på den lila armpattan med handflatan uppåt och säkra den med en armbordsrem.
11. Lägg den andra armen över patientens bröst och se till att handen är i en naturlig, anatomiskt korrekt position.
12. Placera den återstående lila armbådan mellan patientens arm och bröst, parallellt med patientens underarm. Centrera den lila armpattan under patientens hand och vik tillbaka den över handen, och placera patientens hand i det lila skummet på armpattans dyna.
13. Fäst den lila tvådelade kroppsremmen runt patienten, över patientens armbåge, arm och lila armbordsdyna och fäst den med kardborreknäppningen.

Se slutförd installationsillustration för referens. (Figur 7)


Figur 6

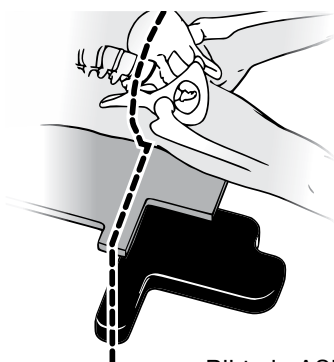

Rikta in ASIS med flikarna på Pink Hip Pad och bordstillbehöret.

Figur 7

Avslutad installation med korrekt placerad patient.

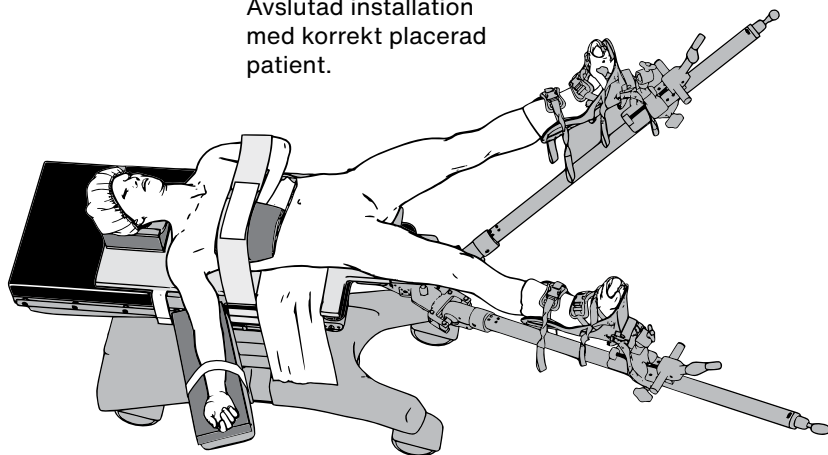

*Distribueras exklusivt av S+N

Symbolordlista

	Medicinsk utrustning
	Varning
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Batchkod

	Använd inte om förpackningen är skadad
	Återanvänd inte
	Ingen latex
	Kvantitet
	Katalognummer

	Se elektronisk bruksanvisning
	locke steril
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Europeisk överensstämmelse

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP066 R1 1/20/2022