

Pink Hip Kit - S+N

Instrucciones de uso

Sistema de inmovilización de cadera sin tornillos

Descripción del dispositivo

El Pink Hip Kit S+N está diseñado para usarse con el sistema de inmovilización de cadera Smith and Nephew.

El Pink Hip Kit S+N es de un solo uso y se debe desechar una vez finalizado el procedimiento quirúrgico.

El Pink Hip Kit S+N (Figura 1) consta de los siguientes componentes:

- A. Reposacabezas (1)
- B. Almohadilla Pink Hip Pad (1)
- C. Correa para el cuerpo (1)
- D. Sábana para elevación (1)
- E. Correas del soporte para brazos (1 par)
- F. Almohadillas del soporte para brazos (1 par)

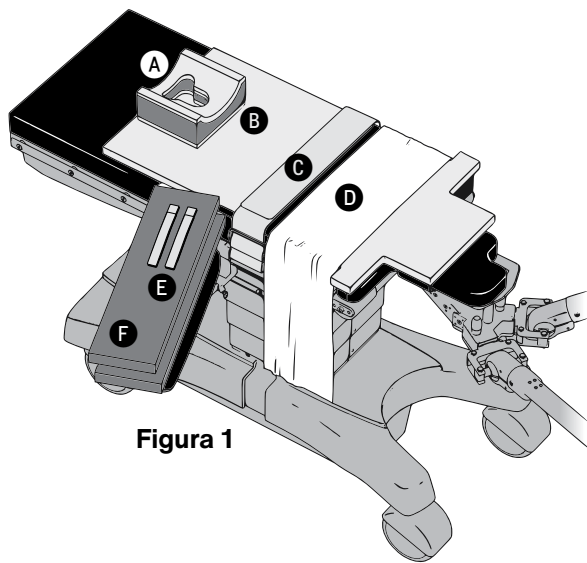


Figura 1

Uso previsto

El Pink Hip Kit S+N debe utilizarlo profesional médico según estas instrucciones de uso. El entorno de uso debe ser un centro sanitario profesional.

Uso previsto

El Pink Hip Kit S+N está diseñado para su uso con el sistema de inmovilización de cadera y evita el movimiento del paciente en la mesa quirúrgica durante los procedimientos artroscópicos de cadera.

Instrucciones de uso

El Pink Hip Kit S+N está indicado para inmovilizar a los pacientes durante los procedimientos artroscópicos de cadera.

Grupos de pacientes objetivo

Los pacientes objetivo son los que el cirujano determine que necesitan someterse a un procedimiento artroscópico de cadera.

Contraindicaciones

- Ninguna

Advertencias

- El proveedor de atención médica debe familiarizarse con las instrucciones de uso del producto así como formar al personal de atención médica adecuado.
- Se prohíbe el uso del producto si no se siguen las indicaciones o el uso previsto. Las modificaciones del producto pueden cambiar los resultados esperados.
- Durante el uso y almacenamiento del Pink Hip Kit S+N, asegúrese de que la almohadilla Pink Hip Pad esté siempre plana. No la enrolle ni la doble.
- Asegúrese de que la piel del paciente esté en contacto directo con la almohadilla Pink Hip Pad durante todo el procedimiento.


Precauciones

- Inspeccione el embalaje del producto antes de abrirlo. Si el embalaje está dañado o perforado, **NO UTILICE EL PRODUCTO**.
- Inspeccione el producto y el contenido cuando los saque del embalaje. Si el producto está dañado o defectuoso, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto inmediatamente con el fabricante para obtener ayuda.
- Tenga cuidado al inmovilizar a los pacientes quirúrgicos. No arrastre a los pacientes por la superficie de la almohadilla Pink Hip Pad, ya que podría dañar el producto y perder su función.

1. Consulte las instrucciones de uso del sistema de inmovilización de cadera Smith and Nephew para obtener información sobre el montaje del sistema.
2. Coloque la almohadilla Pink Hip Pad sobre la mesa quirúrgica de modo que las lengüetas de alineación queden alineadas con el accesorio de la mesa supina Smith and Nephew. (Figura 2) El texto "This Side Up" (Este lado hacia arriba) debe quedar mirando hacia arriba en las correas blancas de velcro de la almohadilla Pink Hip Pad.

Figura 2


Alinee las pestañas de la almohadilla Pink Hip Pad con las del accesorio de la mesa.

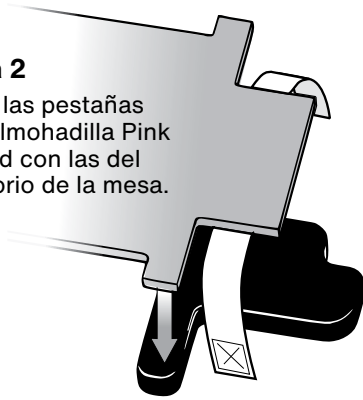

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la almohadilla Pink Hip Pad quede en contacto directo con la superficie de la almohadilla de la mesa quirúrgica.

3. Enganche todas las correas de velcro blancas a los rieles de la mesa quirúrgica colocando la parte de bucles de la lengüeta hacia abajo entre la mesa y el riel accesorio, y después hacia arriba sobre el exterior del riel, y colocando la parte de ganchos del velcro sobre la parte de bucles. (Figura 3)

Figura 3

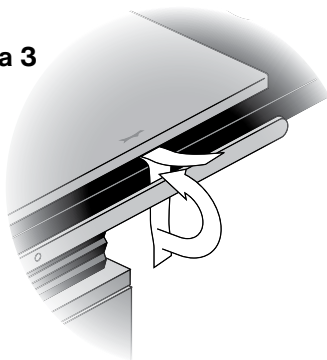


4. Fije la correa ancha púrpura de la almohadilla debajo del accesorio de la mesa quirúrgica colocando primero la parte de la correa sin velcro debajo del accesorio de la mesa y superponiéndola al extremo restante de la correa, asegurando el velcro para obtener un ajuste firme. (Figura 4)
5. Coloque el reposacabezas en la almohadilla Pink Hip Pad cerca del borde más alejado del accesorio de la cadera a una distancia suficiente para colocar la cabeza del paciente. (Figura 1)
6. Centre la sábana para elevación sobre la almohadilla, justo encima de las lengüetas de alineación. (Figura 1)

PRECAUCIÓN: La sábana para elevación debe cubrir solo la parte de la almohadilla donde reposará la parte baja de la espalda del paciente (entre la escápula y el sacro).

Figura 4


Vista desde debajo del accesorio de mesa

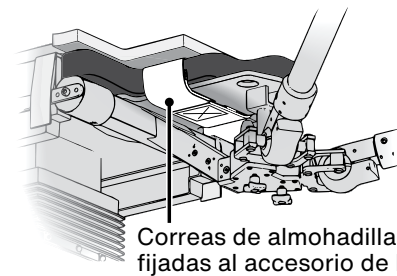

Correas de almohadilla púrpuras fijadas al accesorio de la mesa.

7. Asegure ambas partes de la correa de dos partes para el cuerpo a los rieles accesorios:
 - Identifique cada parte de la correa: la parte A tiene un pequeño cuadrado de velcro y la parte B tiene una lengüeta de velcro larga. (Figura 5)
 - Comenzando con la parte A, oriente la correa de modo que el pequeño cuadrado de velcro mire hacia afuera en dirección contraria a la almohadilla de la mesa. Levante el extremo del cinturón entre la mesa y el riel accesorio y deslice la hebilla de plástico hacia abajo sobre el extremo de la correa. Pase la correa a través de la hebilla hasta que se ajuste al riel accesorio y coloque el extremo libre sobre la mesa.
 - Repita el procedimiento con la parte B de la correa en el otro lado de la mesa, asegurándose de que el lado de ganchos de la lengüeta larga de velcro mire hacia adentro en dirección a la almohadilla de la mesa.
 - Junte las correas con la lengüeta larga de velcro de la parte B sobre la parte A.

Figura 5

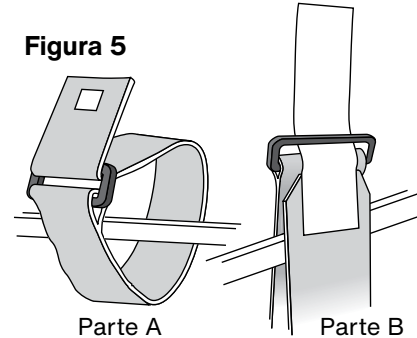

8. Transfiera al paciente a la almohadilla Pink Hip Pad. Coloque al paciente de la siguiente forma:
 - La espina ilíaca anterosuperior (EIAS) del paciente debe colocarse directamente sobre las pestañas de alineación. (Figura 6)
 - Aproximadamente 15 cm de la almohadilla Pink Hip Pad sobresaldrán del pliegue glúteo del paciente.
 - Asegúrese de que los hombros no sobresalgan del borde superior de la almohadilla Pink Hip Pad para maximizar el contacto con la piel.
 - La piel de la región escapular y del sacro debe estar en contacto con la superficie de la almohadilla Pink Hip Pad.
 - Si es necesario, utilice la sábana de elevación para LEVANTAR con cuidado al paciente de la almohadilla y cambiarlo de posición. No arrastre al paciente sobre la almohadilla. Asegúrese de que la almohadilla Pink Hip Pad permanezca plana en todo momento.

9. Coloque una almohadilla púrpura de soporte para brazos en el soporte para brazos de la mesa quirúrgica en el lado opuesto a la cadera que se va a operar.
10. Coloque el brazo del paciente sobre la almohadilla púrpura del soporte para brazos con la palma hacia arriba y asegúrelo con una de las correas del soporte para brazos.
11. Coloque el otro brazo sobre el pecho del paciente, asegurándose de que la mano esté en una posición natural y anatómicamente correcta.
12. Coloque la otra almohadilla púrpura del soporte para brazos entre el brazo y el pecho del paciente, paralela al antebrazo. Centre la almohadilla púrpura del soporte para brazos debajo de la mano del paciente y dóblela hacia atrás sobre la mano, introduciendo la mano del paciente dentro de la espuma púrpura de la almohadilla del soporte para brazos.
13. Coloque la correa púrpura de dos partes para el cuerpo alrededor del paciente, sobre el codo, el brazo y la almohadilla púrpura del soporte para brazos, asegurándola con el cierre de velcro.

Consulte la ilustración del montaje completo como referencia. (Figura 7)

Figura 7

Montaje completo con el paciente correctamente posicionado.


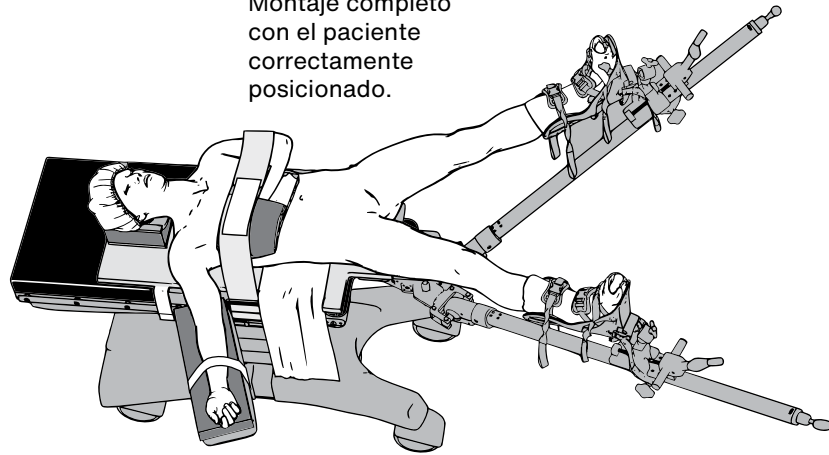


Figura 6

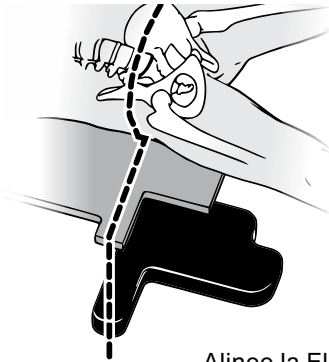

Alinee la EIAS con las pestañas de la almohadilla Pink Hip Pad y el accesorio de mesa.

*Distribuido exclusivamente por S+N

Glosario de símbolos

	Dispositivo médico
	Precaución
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Código de lote

	No utilizar si el paquete está dañado
	No reutilizar
	Sin látex
	Cantidad
	Numero de catalogo

	Consultar instrucciones electrónicas para uso
	Sin esterilizar
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conformidad Europea



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP067 R1 1/20/2022