

MODE D'EMPLOI : POSITIONNEUR D'ARC ROSE — XS

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.

DESCRIPTION

Le positionneur Pink Arc – XS est un dispositif à usage unique utilisé lors des interventions chirurgicales. L'utilisation prévue du positionneur Pink Arc – XS est de fournir une protection, un positionnement chirurgical approprié et un amortissement lors du positionnement des patients pour le positionnement chirurgical et la prévention des blessures liées à la pression.

INDICATIONS

Le positionneur Pink Arc—XS est un dispositif à usage unique, non stérile, à utiliser pendant une intervention chirurgicale pour assurer une protection, un positionnement chirurgical approprié et un amortissement afin de prévenir les blessures du patient.

OBJECTIF PRÉVU ET UTILISATEUR

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par des professionnels de santé qualifiés.

CONTRADICTIONS

Cet appareil n'est pas conçu, vendu ou destiné à être utilisé autrement que comme indiqué.

CONNAISSANCE ET UTILISATION


L'utilisation professionnelle nécessite la connaissance de cette notice d'utilisation. L'utilisation de l'appareil est limitée au bloc opératoire d'un hôpital ou d'un centre chirurgical.

AVANTAGES CLINIQUES

Assure une protection, un positionnement chirurgical approprié et un amortissement pour prévenir les blessures des patients pendant les interventions chirurgicales.

PRÉPARATION ET UTILISATION

- Le positionneur Pink Arc—XS peut être utilisé pour une variété de besoins de positionnement rendus nécessaires par un besoin chirurgical.
- Placez le positionneur d'arc rose XS en contact direct avec la peau pour utiliser la douceur, l'immersion et la caractéristiques d'enveloppement pour aider à protéger contre les blessures positionnelles..
- Assurez-vous de vérifier en permanence l'intégrité de la peau du patient et sa bonne circulation.

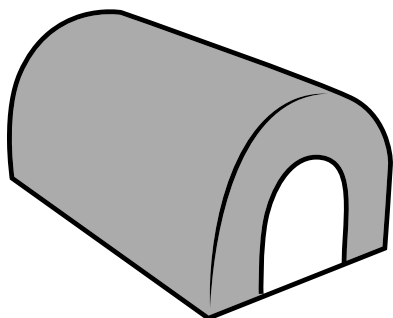

ÉLIMINATION

- Après utilisation, le positionneur d'arc rose XS doit être éliminé conformément à la politique de l'hôpital.

AVERTISSEMENTS

- Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour un usage sur un seul patient. La réutilisation ou le retraitement de ce dispositif l'appareil peut entraîner sa défaillance ou des blessures ultérieures.
- Le retraitement de ce dispositif peut créer un risque de contamination et d'infection du patient.
- Ne pas réutiliser ni retraiter ce dispositif.
- Après utilisation, le positionneur d'arc rose XS doit être éliminé conformément à la politique de l'hôpital.
- Vérifiez l'intégrité de la peau et la bonne circulation.
- Le positionneur de tête pour enfant PinkProtect - XS doit être stocké dans un endroit propre et sec à température ambiante. température avant utilisation. Éviter l'exposition prolongée à des températures élevées

PRÉCAUTIONS

- Le positionneur Pink Arc – XS est destiné à être utilisé uniquement en milieu périopératoire.
- Le positionneur d'arc rose – XS doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation et à toute contre-indications, avertissements ou précautions fournis par le fabricant de l'instrument associé.
- Surveillez fréquemment le cou, la tête, les yeux, le nez et la bouche du patient pour vous assurer qu'une position sûre est Assurez-vous que la sonde endotrachéale est bien maintenue et qu'elle n'est ni pliée ni déplacée. Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves conséquences, notamment la cécité et l'absence de ventilation.
- Assurez-vous de suivre les politiques et les directives de votre établissement concernant la fréquence de surveillance des patients.
- Avis à l'utilisateur et/ou au patient que tout incident grave survenu en relation avec l'appareil doit être signalé être signalés et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi, ainsi qu'à Xodus Medical et à son représentant autorisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les matériaux de fabrication comprennent:
 - » Mousse de polyuréthane
- Durée de conservation – indéfinie

STOCKAGE, TRANSPORT ET CONDITIONS D'EXPLOITATION

- Le positionneur d'arc rose XS doit être stocké dans un endroit propre et sec à température ambiante avant utilisation. Évitez toute exposition prolongée à des températures élevées.



Ne pas réutiliser



Non stérile



Dispositif médical



xodusmedical.com/eifu

Consultez les instructions d'utilisation ou consultez mode d'emploi électronique




Attention, consulter Documents d'accompagnement



Non fabriqué à partir de matières naturelles Latex de caoutchouc



Ne pas utiliser si le Le colis est endommagé Ou ouvert

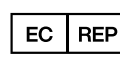

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
The Netherlands



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



MADE IN THE
USA

702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: 1+724-337-5500

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPA005 R0 11/22/2024