

Pink Hip Kit - S + N

Instruções
de utilização

Sistema de posicionamento do quadril sem pilar

Descrição do Dispositivo

O Pink Hip Kit S+N foi concebido para ser usado com o Sistema de Posicionamento de Quadril Smith and Nephew.

O Pink Hip Kit S+N é de utilização única e deve ser eliminado após a conclusão do procedimento cirúrgico.

O Pink Hip Kit S+N (*Figura 1*) contém os seguintes componentes:

- A. Apoio de cabeça (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Alça de corpo (1)
- D. Lençol de elevação (1)
- E. Alças de placa do braço (1 par)
- F. Almofadas de placa do braço (1 par)

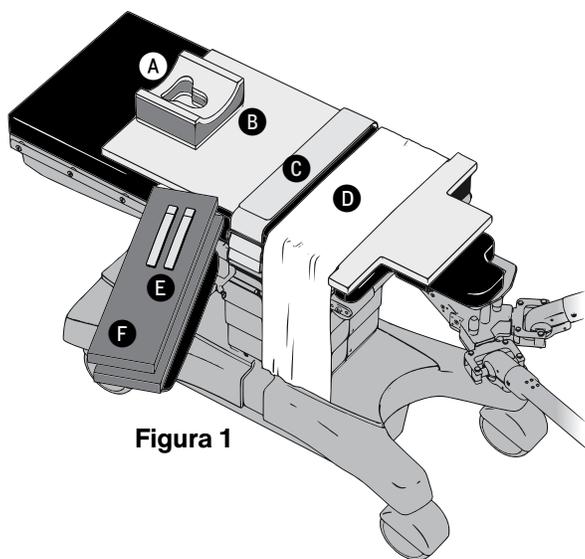


Figura 1

Utilizadores previstos

O Pink Hip Kit S+N destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde de acordo com estas instruções de utilização. O ambiente de utilização é um estabelecimento de saúde profissional.

Utilização Prevista

O Pink Hip Kit S+N foi desenvolvido para ser usado com o sistema de posicionamento de quadril e evita o movimento do doente na mesa de cirurgia durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Instruções de utilização

O Pink Hip Kit S+N é indicado para uso no posicionamento de doentes durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Grupos de doentes alvo

A população de doentes é composta por doentes para os quais um procedimento artroscópico do quadril é considerado necessário pelo cirurgião.

Contra-indicações

- Nenhuma

Avisos

- É da responsabilidade do profissional de saúde familiarizar-se com as instruções de utilização do produto, bem como dar formação ao pessoal de saúde relevante.
- A utilização do produto não conforme às indicações ou contrária à utilização prevista é proibido. Modificações no produto podem alterar os resultados esperados.
- Durante todo o manuseamento e armazenamento do Pink Hip S + N Kit, a Pink Hip Pad deve ser mantida plana. Não enrole nem dobre.
- Certifique-se de que a pele do doente está em contacto direto com a Pink Hip Pad durante todo o procedimento.


Precauções

- Inspeccione a embalagem do produto antes de a abrir. Se a embalagem do produto estiver danificada ou perfurada, **NÃO UTILIZE O PRODUTO**.
- Inspeccione o produto e o conteúdo ao removê-los da embalagem. Se o produto estiver danificado ou com defeito, **NÃO O UTILIZE** e contacte imediatamente o fabricante para obter suporte.
- Tenha cuidado ao posicionar doentes cirúrgicos. Não arraste os doentes na superfície da Pink Hip Pad, pois isso pode resultar em danos no produto e perda de função.

1. Consulte as instruções de utilização do sistema de posicionamento de quadril Smith and Nephew para obter informações sobre a configuração do sistema.
2. Coloque a Pink Hip Pad na mesa de cirurgia de forma que as guias de alinhamento se alinhem com o acessório de mesa supina Smith and Nephew. (Figura 2) O texto “This Side Up” deve estar voltado para cima nas alças tipo velcro brancas localizadas na Pink Hip Pad.

Figura 2


Alinhe as guias da Pink Hip Pad com as do acessório da mesa.

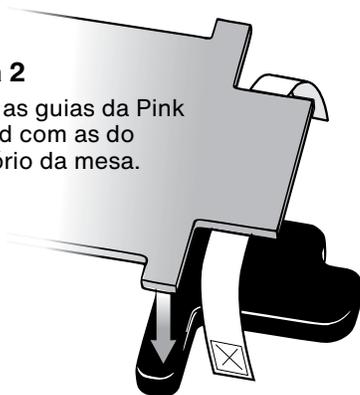

CUIDADO: Certifique-se de que a Pink Hip Pad faz contacto direto com a superfície da almofada da mesa de cirurgia.

3. Prenda todas as alças tipo velcro brancas nos trilhos da mesa de cirurgia colocando a parte do laço da aba para baixo entre a mesa e o trilho de acessórios, depois para cima sobre o lado de fora do trilho e fixando a parte de fecho de velcro sobre a parte do laço. (Figura 3)

Figura 3

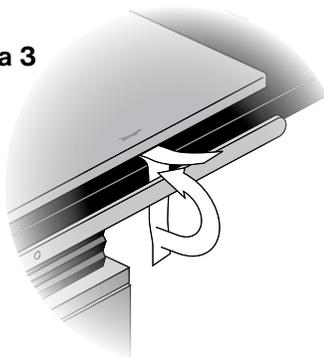

4. Fixe a alça larga da almofada roxa sob o encaixe da mesa cirúrgica colocando primeiro a parte da alça sem os fechos tipo velcro em baixo do encaixe da mesa e sobrepondo-a com a extremidade restante da alça, prendendo o fecho de velcro para garantir um ajuste confortável. (Figura 4)
5. Coloque o posicionador da cabeça na Pink Hip Pad junto à borda mais afastada da fixação do quadril num local que seja suficiente para a colocação da cabeça do doente. (Figura 1)
6. Centre o lençol de elevação sobre a almofada logo acima das guias de alinhamento. (Figura 1)

CUIDADO: O lençol de elevação deve cobrir apenas a parte da almofada que se destina à parte inferior das costas do doente (entre a omoplata e o sacro).

Figura 4


Vista da parte inferior do acessório da mesa



Alças de almofada roxa fixadas no acessório da mesa.

7. Prenda ambas as partes da alça de corpo de duas partes aos trilhos de acessórios:
 - Identifique cada parte da alça — a Parte A tem um pequeno quadrado tipo velcro e a Parte B tem uma aba longa tipo velcro. (Figura 5)
 - Começando com a Parte A, oriente a alça de forma que o pequeno quadrado tipo velcro fique voltado para fora, afastado da almofada da mesa. Puxe a ponta do cinto para cima entre a mesa e o trilho de acessórios e deslize a fivela de plástico para baixo sobre a ponta da alça. Passe a alça pela fivela até que esteja ajustada ao trilho de acessórios e coloque a extremidade livre sobre a mesa.
 - Repita o procedimento com a Parte B da alça do outro lado da mesa, garantindo que o lado de fecho da aba tipo velcro longa esteja voltado para dentro, em direção à almofada da mesa.
 - Una as alças com a aba tipo velcro longa da Parte B por cima da Parte A.

Figura 5

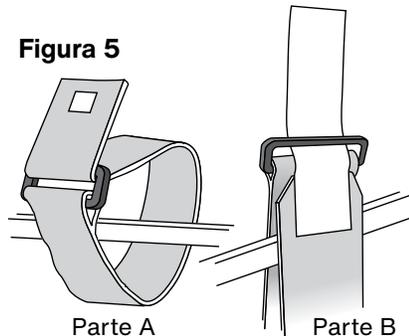

8. Transfira o doente para a Pink Hip Pad. Posicione o doente da seguinte forma:
 - A espinha ílaca antero-superior (ASIS) do doente deve ser posicionada diretamente nas guias de alinhamento. (Figura 6)
 - Aproximadamente 15 centímetros da Pink Hip Pad serão estendidos para lá da prega glútea do doente.
 - Certifique-se de que os ombros não ultrapassam a borda superior da Pink Hip Pad para maximizar o contacto com a pele.
 - A pele da região dos ombros e o sacro devem estar em contacto com a superfície da Pink Hip Pad.
 - Se necessário, utilize o lençol de elevação para LEVANTAR cuidadosamente o doente da almofada para reposicionar. Não arraste o doente na almofada. Certifique-se de que a Pink Hip Pad permanece sempre plana.

9. Coloque uma almofada de placa do braço roxa na placa do braço da mesa de cirurgia no lado oposto do quadril a operar.
10. Coloque o braço do doente na almofada da placa do braço roxa com a palma para cima e prenda-a com uma alça da placa do braço.
11. Coloque o outro braço sobre o peito do doente, garantindo que a mão fica numa posição natural e anatomicamente correta.
12. Coloque a outra almofada da placa do braço entre o braço e o tórax do doente, paralelamente ao antebraço do doente. Centre a almofada da placa do braço roxa sob a mão do doente e dobre-a de volta sobre a mão, prendendo a mão do doente dentro da espuma roxa da almofada da placa do braço.
13. Fixe a cinta corporal roxa de duas partes em volta do doente, sobre o cotovelo, braço e a almofada da placa do braço roxa, prendendo-a com o fecho tipo velcro.

Consulte a ilustração de configuração para referência.
(Figura 7)

Figura 7

Configuração concluída com o doente posicionado corretamente.


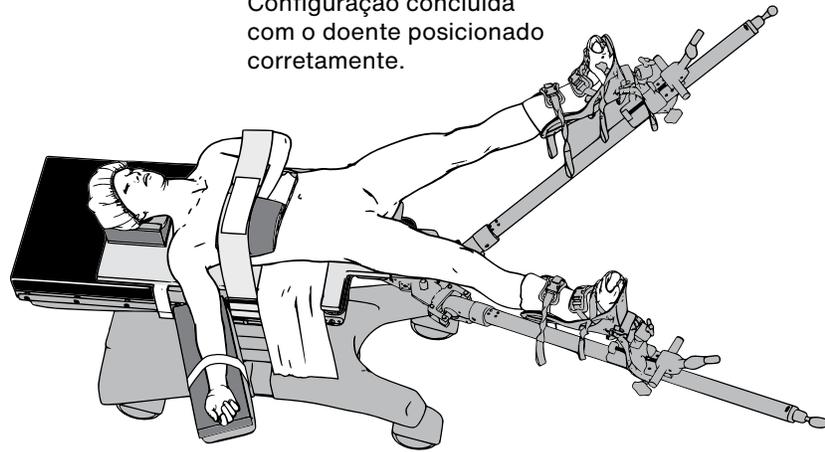


Figura 6

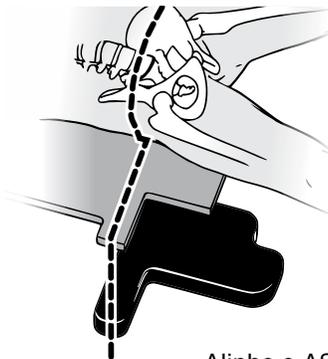

Alinhe o ASIS com as guias da Pink Hip Pad e do acessório da mesa.

*Distribuído exclusivamente pela S+N

Glossário de símbolos

	Dispositivo médico
	Cuidado
	Fabricante
	Data de fabrico
	Código do lote

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Sem látex
	Quantidade
	Número de catálogo

	Consulte as instruções de utilização eletrónicas
	Não estéril
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Conformidade Europeia

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP072 R1 1/20/2022