


The Pink Pad[®] EXT

Sistema di posizionamento prolungato

Istruzioni per l'uso

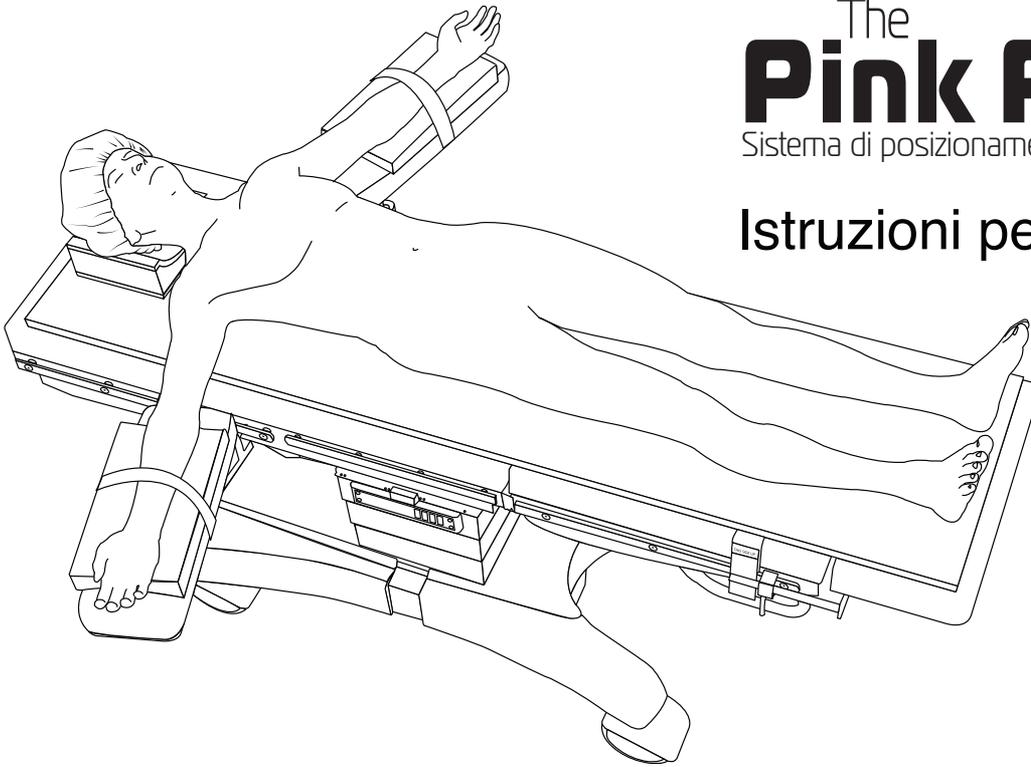

1. Posizionare il Pink Pad EXT sul tavolo operatorio, facendo attenzione a posizionare le cinghie bianche in velcro con la scritta "This side up" verso l'alto. Il Pink Pad EXT deve essere utilizzato con il paziente in posizione supina. Il dispositivo di riscaldamento può essere posizionato sotto il Pink Pad EXT.
2. Attaccare le cinghie bianche in velcro alle guide del letto chirurgico facendo un giro attorno alle guide stesse con la cinghia inferiore e fissandoci la cinghia superiore in velcro.
3. Appoggiare il telino di sollevamento sul materassino in modo che sia centrato tra le cinghie bianche in velcro.
4. Seguire il protocollo ospedaliero per l'intubazione. Quindi posizionare correttamente il paziente sul materassino. **IMPORTANTE: PER MANTENERE L'INTEGRITÀ DELLA PELLE DEL PAZIENTE E PREVENIRE LESIONI, LA PELLE DEL PAZIENTE DEVE ESSERE IN CONTATTO DIRETTO CON IL PINK PAD EXT.** Utilizzare il telino di sollevamento incluso nel kit per sollevare con cura il paziente e per riposizionarlo secondo necessità. Assicurarsi che il materassino rimanga sempre completamente piatto.
5. Appoggiare ciascun cuscinetto per il braccio con DermaProx™ su entrambi i supporti per le braccia. Posizionare il braccio del paziente in modo che il gomito ed il polso poggino comodamente sul cuscinetto.
6. Chiudere le cinghie dei cuscinetti per le braccia avvolgendole attorno ad entrambi i supporti degli arti, ai cuscinetti stessi ed al braccio del paziente.
7. Vedere le istruzioni per utilizzare correttamente i protettori del braccio One-Step. **IMPORTANTE: NON TUTTI I KIT DISPONGONO DI PROTEZIONI PER IL BRACCIO.**

ATTENZIONE:

1. Prima di utilizzare il Pink Pad EXT, assicurarsi che il materassino sia fissato saldamente al tavolo operatorio e che sia pulito e privo di residui.
2. Seguire le politiche e le linee guida della struttura per la frequenza del monitoraggio dei pazienti. Controllare l'integrità della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.
3. Prestare attenzione a proteggere il Pink Pad EXT dall'esposizione a soluzioni per la preparazione dell'intervento.
4. Maneggiamento e stoccaggio: durante TUTTO il maneggiamento e lo stoccaggio, assicurarsi che il cuscinetto sia disteso.

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive Tel: 724.337.5500
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A. Fax: 724.337.0555


xodusmedical.com | info@xodusmedical.com



MADE IN THE
USA



FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

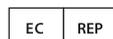


EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

LITIFUPP023 R0 12/9/19

Protezioni per il braccio One-Step

Istruzioni per l'uso

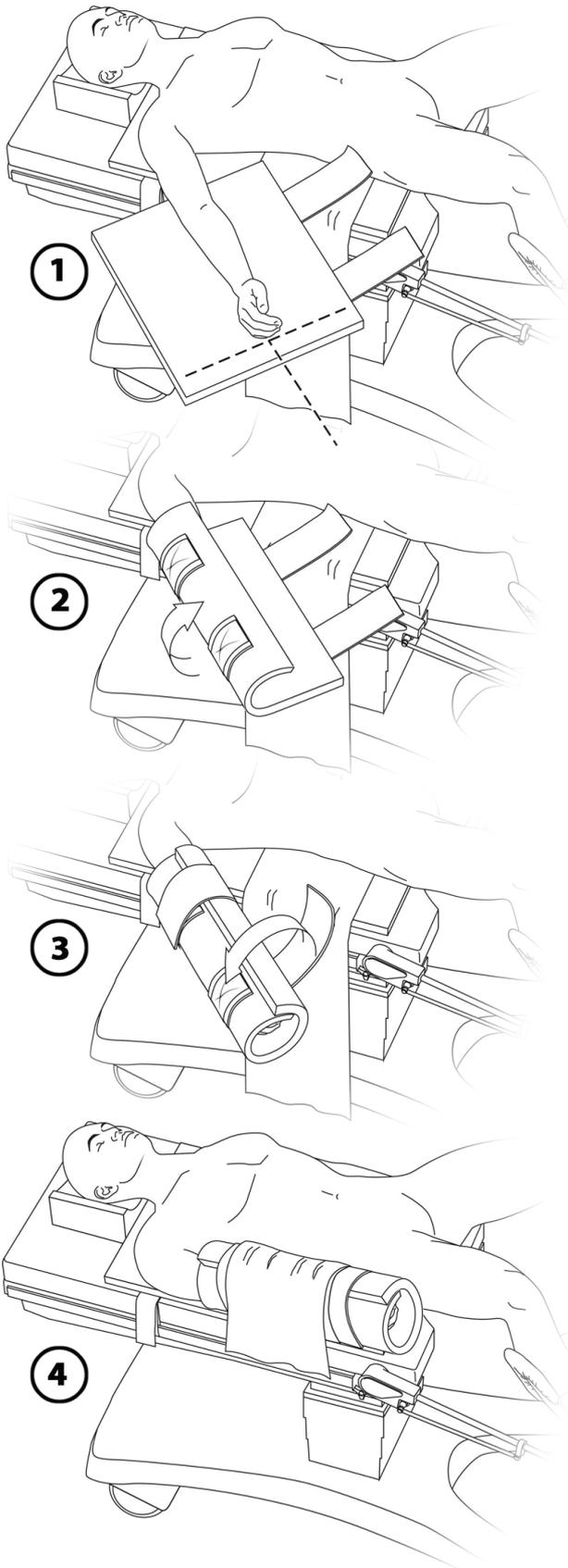

1. Posizionare la protezione per il braccio One-Step™ sotto il braccio del paziente, centrando lateralmente la protezione del braccio con le cinghie rivolte verso il basso e verso il busto del paziente.

Il cuscinetto dovrebbe estendersi sopra il gomito e appena sotto i polpastrelli delle dita. La mano deve essere adagiata in posizione anatomica naturale con i palmi rivolti verso l'interno in modo da non interferire con il nervo ulnare.

La protezione per il braccio One-Step™ andrà a proteggere il braccio, il nervo ulnare e le dita consentendo contemporaneamente un facile accesso alle dita ed al sito per iniezioni intravena.

2. Avvolgere la parte esterna della protezione sul braccio.
3. Successivamente, avvolgere la parte rimanente della protezione del braccio sul braccio e fissare le cinghie alle corrispondenti toppe in Velcro™, come mostrato. Assicurarsi che il protettore del braccio One-Step™ sia saldamente avvolto attorno al braccio del paziente.

In questa fase, verificare il corretto allineamento del polso e delle dita. Inoltre, ispezionare i pulsossimetri, le linee intravenose, ecc. al fine di garantire il corretto posizionamento. L'accesso a questi parametri è semplice e ripetibile.

Ripetere i passaggi 1-3 per l'altro braccio.

4. Una volta installati le protezioni delle braccia One-Step™, avvolgere il telino per il sollevamento secondo il protocollo dell'ospedale, infilandolo tra il paziente e Pink Pad EXT.

I metodi per ripiegare il telino variano in base al protocollo ospedaliero. Il telo di sollevamento può essere nascosto sotto il paziente o sotto il materasso del tavolo operatorio. Il telino per il sollevamento non deve essere interposto tra il Pink Pad EXT e il materasso del tavolo operatorio.