


Mode d'emploi

# Chaussons de traction


40531H

Reportez-vous aux protocoles de positionnement du patient de votre établissement avant utilisation


1. Orientez correctement le chausson. Le bord cousu s'alignera avec la plante du pied du patient.
2. Ouvrez les sangles de la fermeture Velcro et faites glisser le chausson ouvert sur le pied du patient dans le bon sens.
3. Enroulez les côtés du chausson autour de l'ajustement et fixez la fermeture Velcro. L'ajustement doit être serré, sans entraver la circulation.
4. Enveloppez le mollet et fixez la fermeture Velcro restante. Encore une fois, assurez-vous de ne pas trop serrer.
5. Le chausson est maintenant fixé et le pied est prêt à être placé dans le dispositif de traction. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre pied.

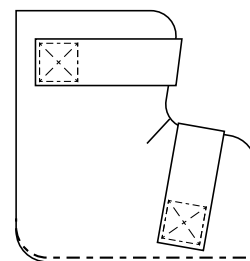


- 1 Le bord cousu s'aligne sur la plante du pied.

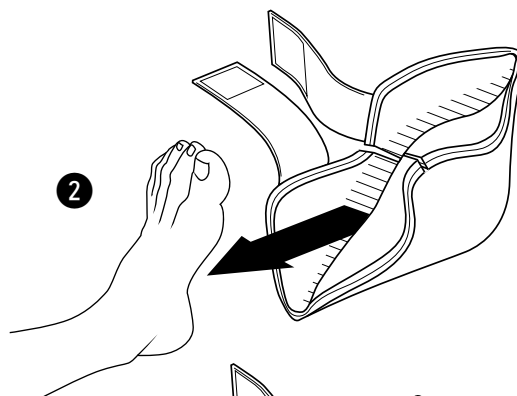


2

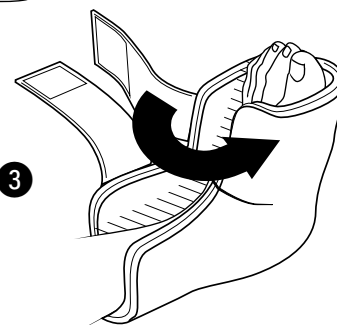

3

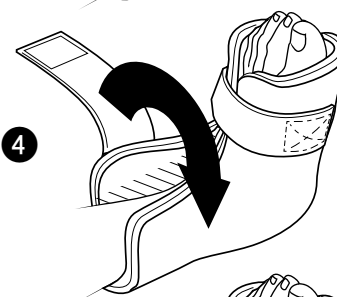

4

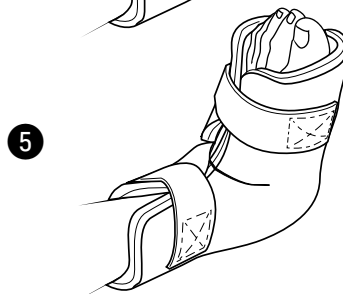

5

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

  
xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

LITIFUPP048 R0 6/17/2021