


Istruzioni per l'uso

Stivaletti per la trazione


40531H

Consultare i protocolli di posizionamento del paziente della propria struttura, prima dell'uso

1. Stabilire il corretto orientamento dello stivaletto. Il bordo cucito deve essere allineato con la pianta del piede del paziente.
2. Aprire le fasce di chiusura in velcro e far scorrere lo stivaletto aperto sotto al piede del paziente, con l'orientamento corretto.
3. Avvolgere i lati dello stivaletto in modo che calzi bene e fissare la chiusura in velcro. La calzata deve essere aderente, senza pregiudicare la circolazione.
4. Avvolgere la parte inferiore del polpaccio e fissare l'altra parte della chiusura con il velcro. Anche in questo caso, assicurarsi di non stringere eccessivamente.
5. Ora, lo stivaletto è fissato e il piede è pronto per essere posizionato nello stivaletto per la trazione. Ripetere i passaggi 1-4 per l'altro piede.

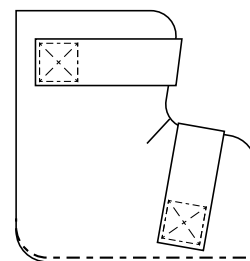


- 1 Il bordo cucito deve essere allineato con la pianta del piede.

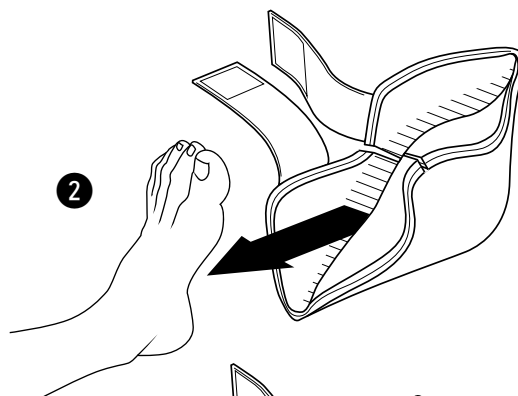


2



3

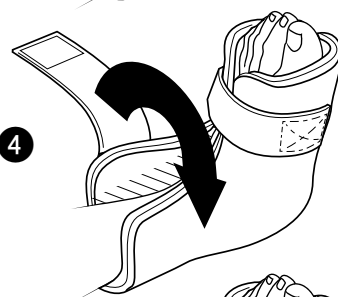

4

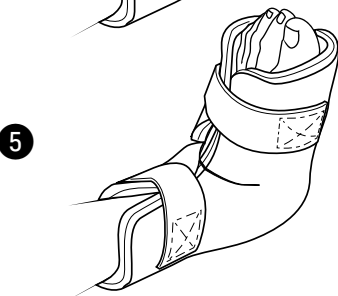

5

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

LITIFUPP049 R0 6/17/2021