


## Instrukcja użytkowania

# Wkładki do ortez trakcyjnych


40531H

Przed użyciem należy zapoznać się z protokołami placówki dotyczącymi pozycjonowania pacjenta

1. Ustalić właściwą pozycję wkładki do ortezi. Przy właściwym ustawieniu zszyta krawędź zrówna się z podeszwą stopy pacjenta.
2. Odczepić paski z rzepem i wsunąć otwartą wkładkę do ortezi na stopę pacjenta, ustawiając ją we właściwy sposób.
3. Owinąć boki wkładki do ortezi wokół dopasowania i zabezpieczyć paskiem z rzepem. Dopasowanie powinno przylegać do ciała i nie utrudniać krążenia.
4. Owinąć dolną część łydki nogi i zabezpieczyć drugim paskiem z rzepem. Ponownie należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.
5. Wkładka do ortezi jest teraz zabezpieczona, a stopę można umieścić w ortezi trakcyjnej. Powtórzyć kroki od 1 do 4 dla drugiej stopy.

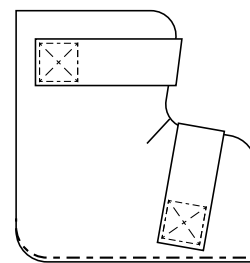


- 1 Zszyta krawędź zrównana z podeszwą stopy pacjenta.

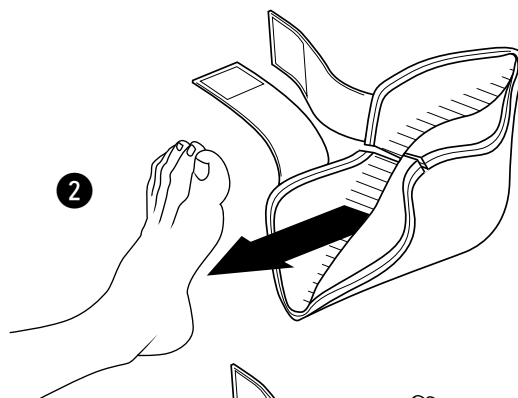


2



3

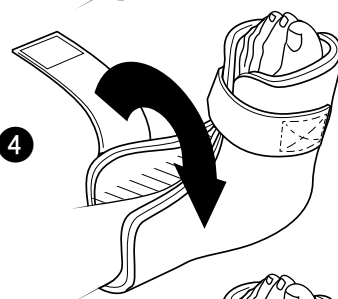

4

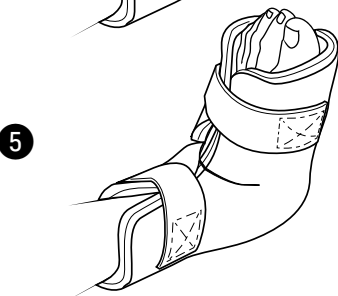

5

**XODUS MEDICAL**  
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500  
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED

  
xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

LITIFUPP051 R0 6/17/2021